

錠剤 計数器

抜き取り検査の入り数チェック、手間じゃないですか？

いろいろな錠剤



ソフトカプセル




ハードカプセル



打錠

今は...

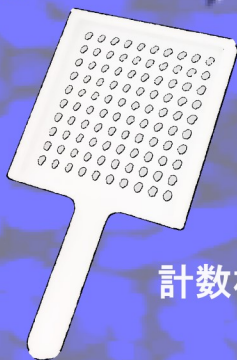

計数板


- ・目視にてチェック
- ・手間がかかる
- ・計数板の管理が面倒など

<操作部>

シンプル操作
カウント表示部2つで
ダブルチェック



これからは

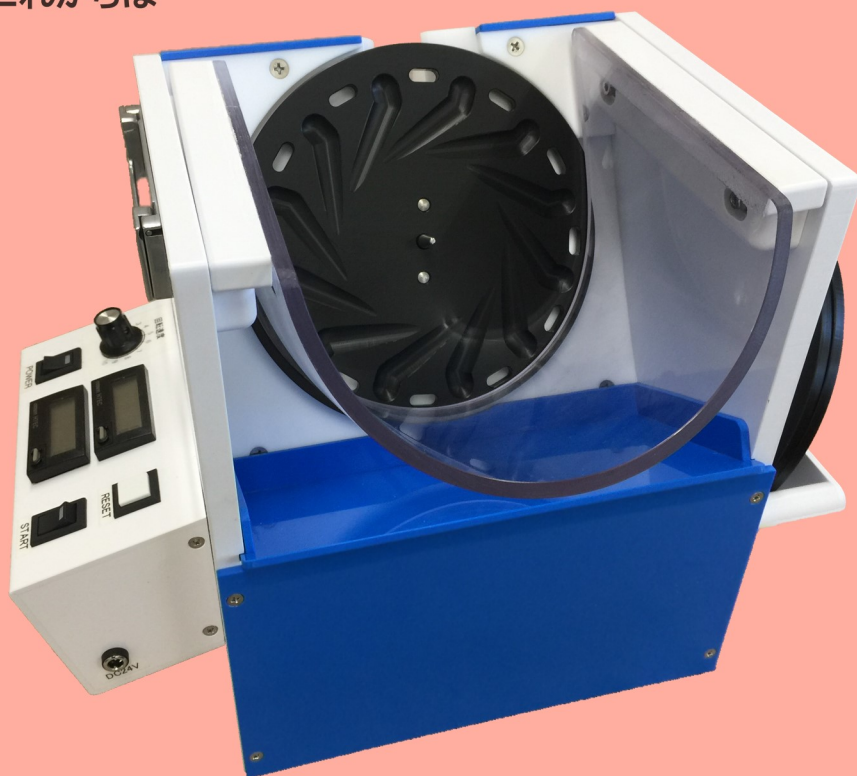

- ・簡単！錠剤入れてスタートするだけ。手間いらず
- ・安心！センサー2つでカウント数をダブルチェック
- ・回転盤を交換するだけで様々な錠剤に対応！
- ・工具不要で治具交換、清掃もラク！

econos

特 徴


- ・簡単操作で作業効率UP
- ・錠剤を2つのセンサーでカウントし精度UP
- ・回転盤の交換のみで多品種に対応
- ・工具レスで分解洗浄可能
- ・クラッチ機構で錠剤が挟まっても自動開放/自動復帰します
- ・特殊形状はサンプルをいただければテストをいたします

本体仕様

仕様	内容
対 応 錠 剤	打錠Φ6～Φ13、ソフトカプセル、ハードカプセル
能 力	処理速度 100～600錠/分（ワーク形状による）
ホ ッ パ ー 容 量	約1リットル
機 能	ホッパー内の錠剤総数のカウント 多品種対応：錠剤に合った回転盤に交換。工具は不要
電 源	AC100V 50Hz 60Hz 80W
外 形	H:233×W320×D267
材 質	筐体：硬質塩ビ 錠剤が接触する部分：テフロン、ポリアセタール、PET
付 属 品	A Cアダプター、回転盤（数1枚）、取扱説明

注意)仕様等は予告なく変更する場合がございます

外 形

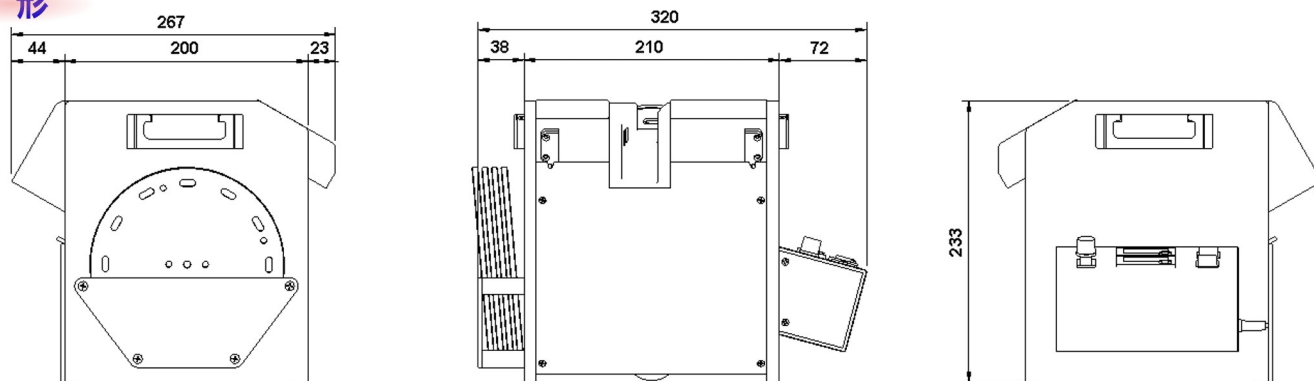

回転盤規格

	ポケット		サイズ (長×短)	対応形状	ワーク		処理速度	備考
	数	形状			対応サイズ(目安)			
					長さ(長さ)サイズ	直径サイズ		
1	30個		11×8.5	 ソフトカプセル	9～10.5	Φ7～8	600/分	
2	24個		13×10	 ソフトカプセル	10～12.5	Φ8～9.5	400/分	
3	12個		25×9	 ハードカプセル	18～21	Φ6～8	200/分	
4	12個		23×8.5	 ハードカプセル	17～19	Φ5～6.5	200/分	
5	30個		11×7	 打錠	厚さ5～6	Φ9～10	600/分	
6	30個		10×5	 打錠	厚さ3～4.5	Φ8～9	600/分	

回転盤形状

材質：ポリアセタール
外形：φ160



No.1とNo.2
ソフトカプセル用
厚さ5mm



No.3とNo.4
ハードカプセル用
厚さ5mm



No.5とNo.6
打錠用
厚さ5mm+5mm(2段構造)

- ・ご購入時にNo.1～No.6の中から1枚お選びいただいたものを標準付属品とします
- ・上記の処理速度は目安です。保証するものではありません
- ・錠剤の形状によってはテストが必要となり、別途見積りいたします(特注品)

econos
株式会社 エコノス・ジャパン

〒439-0012
静岡県菊川市青葉台三丁目15-1
TEL.0537-35-0667(代)
FAX.0537-35-0668
URL <http://www.econos.co.jp>